



snøgg

Therapy pack

HOT & COLD

REUSABLE HOT/COLD PACK

**Nytt
produkt**


snogg

HOT&COLD THERAPY PACK

En kombinert
varme/kuldepakning



COLD USE:

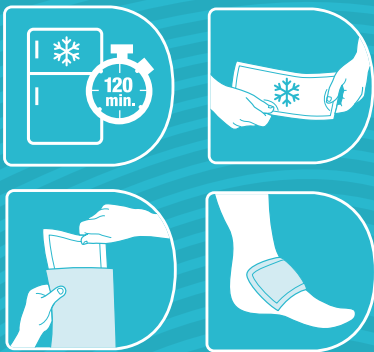

- Nedkjøler bløtdelsskader så omfanget av skaden blir redusert.
- Motvirker hevelse og bloduttredning.
- Virker smertedempende.

HOT USE:



- Øker blodgjennomstrømningen.
- Løsner muskelspenninger.
- Virker smertedempende.

TIPS OG RÅD VED BRUK

- Varm posen i 20 sekunders intervaller i mikrobølgeovn til du kjenner at posen begynner å bli varm.
- Kort deretter ned intervallet til 10 sekunder til posen har fått ønsket temperatur.

- Rist på posen for å sikre at innholdet fordeles jevnt.
- Posen skal varmes opp eller fryses ned uten beskyttelsestrekk, posen puttes i trekket før bruk.

Norgesplaster AS
Granlivegen 21, N-4707 Vennesla
Tel: + 47 38 15 22 00
Epost: snogg@snogg.no
snogg.no | snogg.com